




UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación

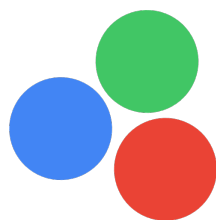

SPECTRASOFT

MANUAL DE USUARIO

Autor:
Gabriel A. Núñez N.

Índice

1. Introducción	3
2. Permisología de los usuarios	4
3. Manejo del MiniScan XE Plus	5
3.1. Conectar y desconectar	5
3.2. Calibrar	5
4. Gestión de mediciones	6
4.1. Realizar una medición	6
4.2. Consultar y borrar resultados de una medición	6
5. Gestión de sesiones	7
5.1. Iniciar y cerrar sesión	7
5.2. Ver información del usuario	8
5.3. Modificar información del usuario	9
5.4. Cambiar contraseña del usuario	9
6. Gestión de historias	10
6.1. Registrar historia	10
6.2. Buscar historia	11
6.3. Ver historia	12

Índice

6.4. Modificar historia	13
6.5. Eliminar historia	13
7. Gestión de muestras	14
7.1. Registrar muestra	14
7.1.1. Registrar fototipo	15
7.1.2. Registrar lesión	18
7.2. Buscar muestra	19
7.3. Ver muestra	20
7.4. Exportar muestra	21
7.5. Modificar muestra	22
7.6. Eliminar muestra	22
8. Gestión de usuarios	23
8.1. Registrar usuario	23
8.2. Administrar usuarios	24
8.2.1. Cambiar rol	25
8.2.2. Cambiar contraseña	26
8.2.3. Eliminar usuario	27

1. Introducción

El Spectrasoft es un software de código abierto para el manejo del MiniScan XE Plus, el cual es usado en el diagnóstico de patologías dermatológicas en pacientes. Este software ofrece funciones de gestión de mediciones, historias médicas de pacientes y muestras. La vista principal del Spectrasoft es la mostrada en la figura 1.

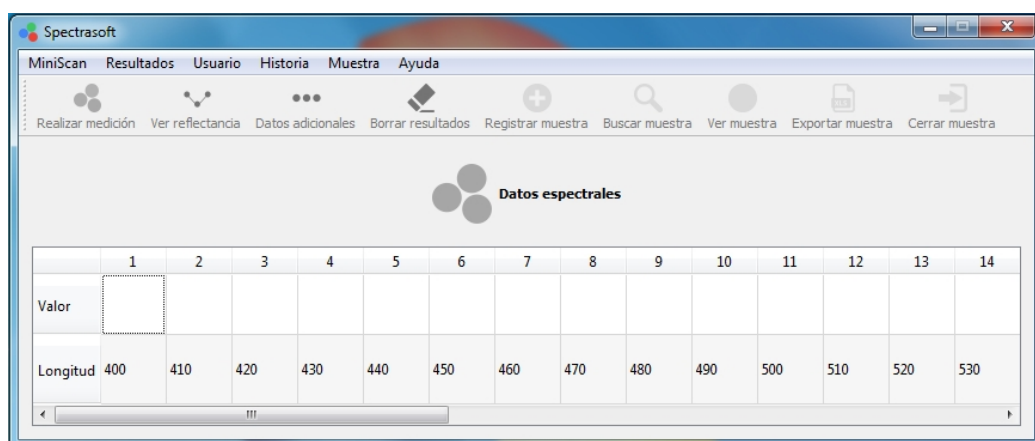


Figura 1: Vista principal del Spectrasoft

2. Permisología de los usuarios

Spectrasoft maneja tres roles de usuario: administradores, dermatólogos e investigadores. Si bien los tres roles comparten acciones comunes que pueden realizar, cada uno tiene permisos diferentes que lo distinguen de los demás. Estos permisos son descritos en la tabla 1.

Tabla 1: Permisología de los usuarios

Usuario	Permisos
Administrador	Manejar el MiniScan XE Plus. Registrar, buscar, modificar y eliminar usuarios. Buscar y ver historias médicas de pacientes. Buscar y ver muestras de pacientes.
Dermatólogo	Manejar el MiniScan XE Plus. Registrar, buscar, ver, modificar y eliminar historias médicas de pacientes. Registrar, buscar, ver, modificar y eliminar muestras de pacientes.
Investigador	Manejar el MiniScan XE Plus. Buscar y ver historias médicas de pacientes. Buscar y ver muestras de pacientes.

Es importante destacar que todas las operaciones de creación/registro, modificación y eliminación requieren de la confirmación del usuario responsable de dicha operación, por medio de su contraseña.

3. Manejo del MiniScan XE Plus

3.1. Conectar y desconectar

Para conectar o desconectar el MiniScan XE Plus, entre al menú del MiniScan. Estas opciones son las ilustradas en la figura 2.



Figura 2: Conectar y desconectar MiniScan XE Plus

3.2. Calibrar

Entre al menú del Miniscan y seleccione la opción estandarizar. Prepare la trampa negra del Miniscan para su medición y seleccione listo, por último prepare la cerámica blanca para su medición y seleccione listo. Todo esto se ilustra en la figura 3.

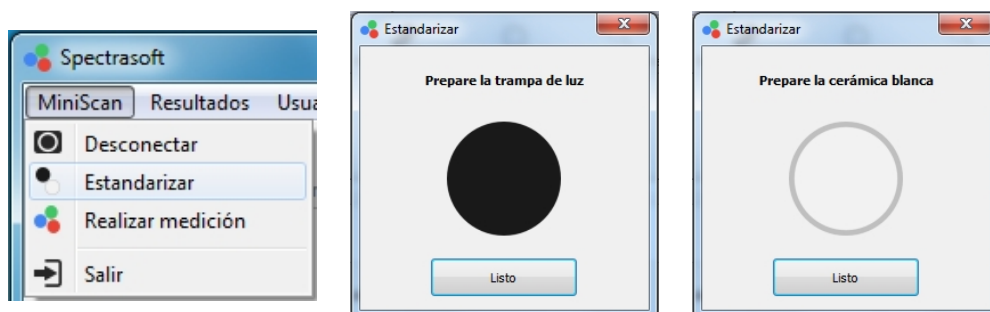


Figura 3: Calibrar el MiniScan XE Plus

4. Gestión de mediciones

4.1. Realizar una medición

Entre al menú del MiniScan, o bien seleccione la opción directamente de la barra de herramientas. Estas opciones son las ilustradas en la figura 4.

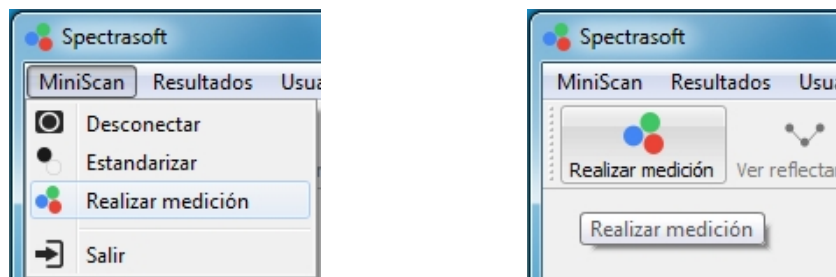


Figura 4: Realizar medición

4.2. Consultar y borrar resultados de una medición

Los datos espectrales de una medición y los resultados relacionados con la misma aparecen se muestran en las figuras 5 y 6.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Valor	17,2101	15,2329	15,13	14,2457	16,0641	18,2752	19,687	21,0481	21,9136	23,1382	23,9694	25,4163	25,2229	24,8392
Longitud	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530

Figura 5: Datos de una medición

5 Gestión de sesiones

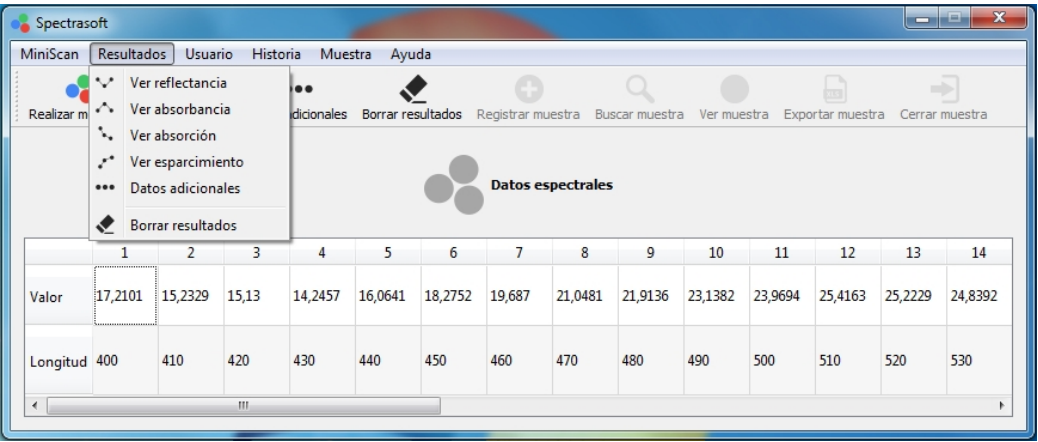


Figura 6: Menú de resultados de una medición

5. Gestión de sesiones

5.1. Iniciar y cerrar sesión

Para iniciar sesión entre al menú de usuario y seleccione la opción iniciar sesión. Debe ingresar su cédula de identidad y su contraseña. Esto es ilustrado en la figura 7.

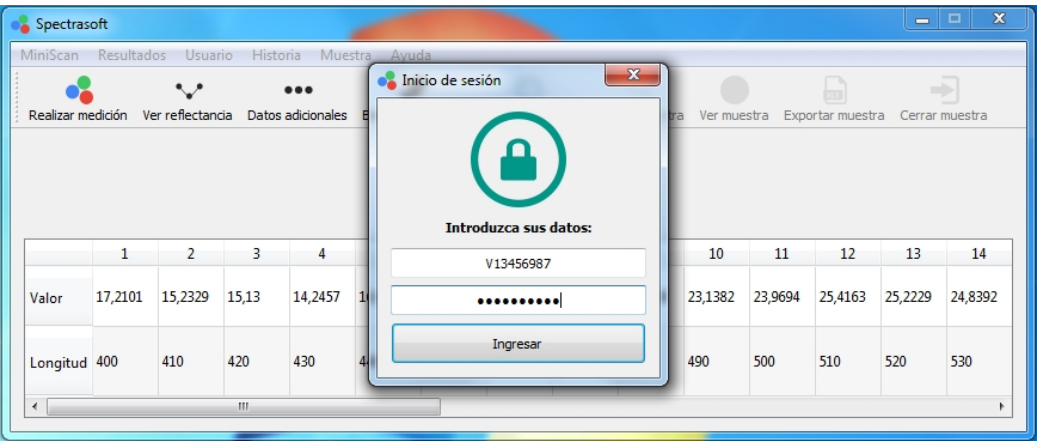


Figura 7: Iniciar sesión

5.2. Ver información del usuario

Seleccione la opción ver usuario, ubicada en el menú de usuario. El menú de usuario y la ventana de información son ilustrados en las figuras 8 y 9.

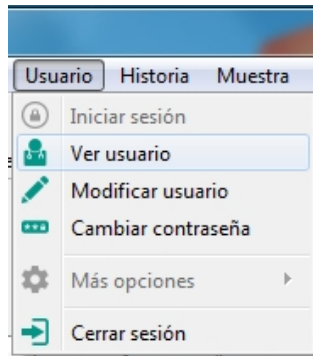


Figura 8: Menú de usuario

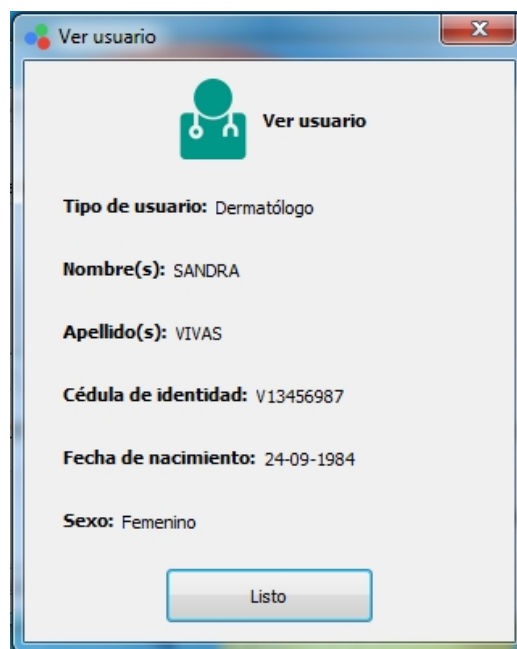



Figura 9: Ver usuario

5.3. Modificar información del usuario

Seleccione la opción modificar usuario, ubicada en el menú de usuario. La ventana para modificar el usuario es ilustrada en la figura 10.

5.4. Cambiar contraseña del usuario


Seleccione la opción cambiar contraseña, ubicada en el menú de usuario. Debe ingresar la contraseña actual del usuario y la nueva contraseña (dos veces) para poder realizar el cambio. La ventana para realizar esta operación se ilustra en la figura 11.

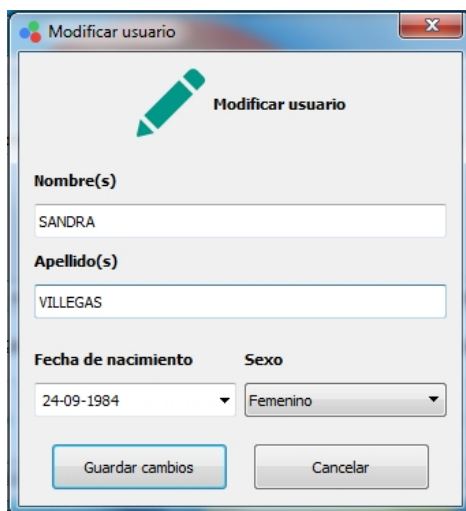

The screenshot shows a window titled "Modificar usuario" with a pencil icon. It contains the following fields and controls:

- Nombre(s):** Text input field containing "SANDRA".
- Apellido(s):** Text input field containing "VILLEGAS".
- Fecha de nacimiento:** Dropdown menu showing "24-09-1984".
- Sexo:** Dropdown menu showing "Femenino".
- Buttons:** "Guardar cambios" (highlighted in blue) and "Cancelar".

Figura 10: Modificar usuario

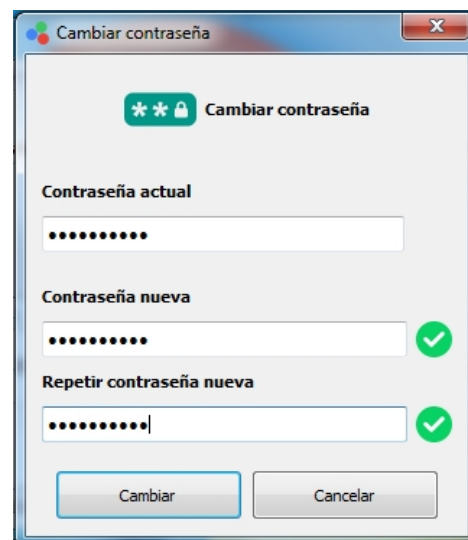

The screenshot shows a window titled "Cambiar contraseña" with a padlock icon. It contains the following fields and controls:

- Contraseña actual:** Password input field (masked with dots).
- Contraseña nueva:** Password input field (masked with dots) with a green checkmark icon to its right.
- Repetir contraseña nueva:** Password input field (masked with dots) with a green checkmark icon to its right.
- Buttons:** "Cambiar" (highlighted in blue) and "Cancelar".

Figura 11: Cambiar contraseña

6. Gestión de historias

6.1. Registrar historia

Seleccione la opción registrar historia, ubicada en el menú historia. Solo los usuarios dermatólogos pueden registrar una historia médica. El menú de historia y la ventana de registro se ilustran en las figuras 12 y 13.


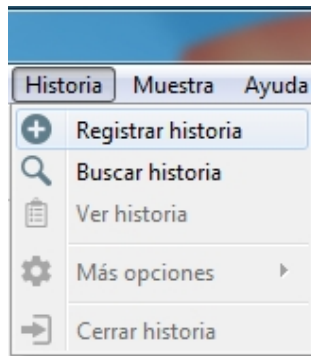


Figura 12: Menú historia

Figura 13: Registrar historia

6.2. Buscar historia

En el menú de historia, seleccione la opción buscar historia. Esta ventana permite filtrar la búsqueda de historias empleando ciertos criterios. Para abrir la historia, seleccione la en la lista de historias y por último seleccione la opción abrir historia. Esta ventana se ilustra en la figura 14.

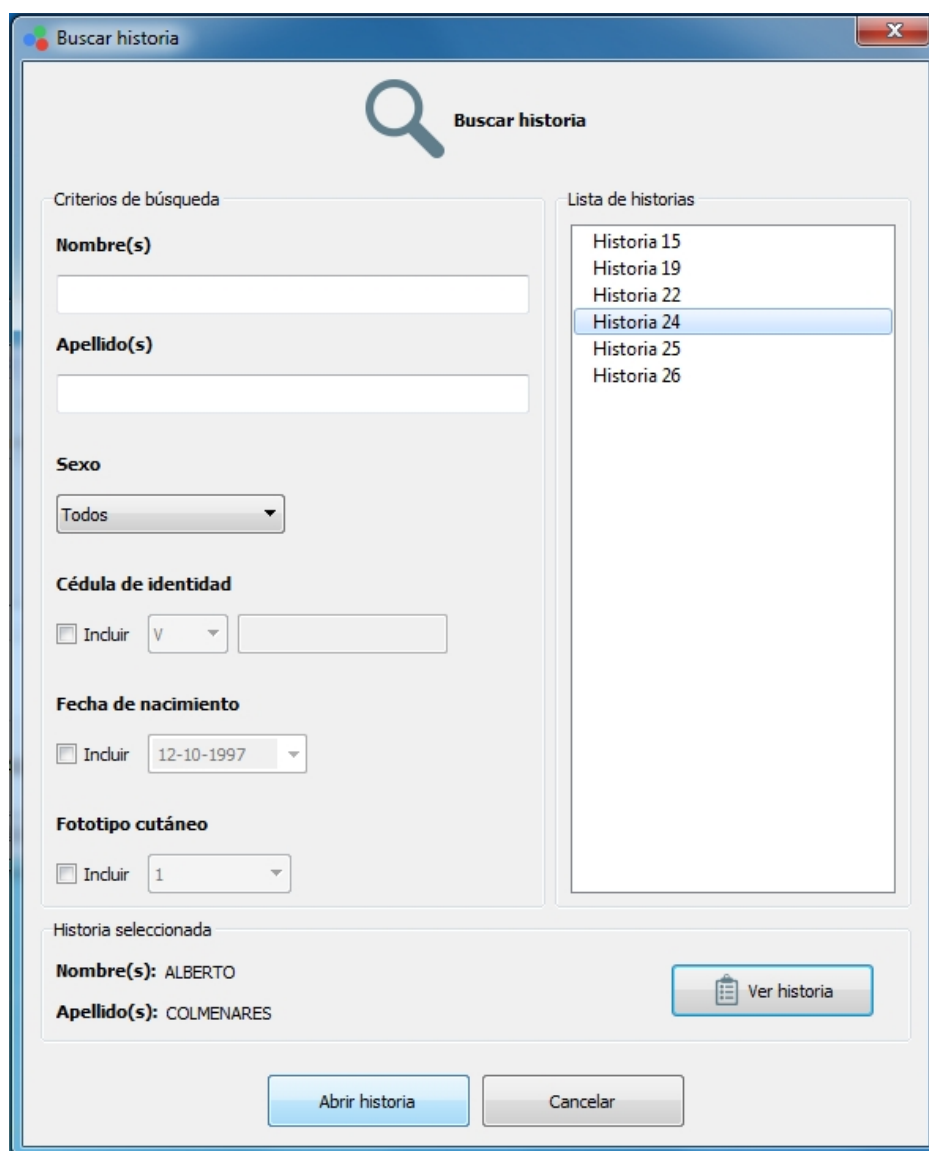

Buscar historia

Criterios de búsqueda

Nombre(s)

Apellido(s)

Sexo

Todos

Cédula de identidad

☐ Incluir V

Fecha de nacimiento

☐ Incluir 12-10-1997

Fototipo cutáneo

☐ Incluir 1

Lista de historias

Historia 15
Historia 19
Historia 22
Historia 24
Historia 25
Historia 26

Historia seleccionada

Nombre(s): ALBERTO

Apellido(s): COLMENARES

Ver historia

Abrir historia Cancelar

Figura 14: Buscar historia

6.3. Ver historia

Seleccione la opción ver historia, ubicada en el menú historia. Esta ventana es ilustrada en la figura 15.

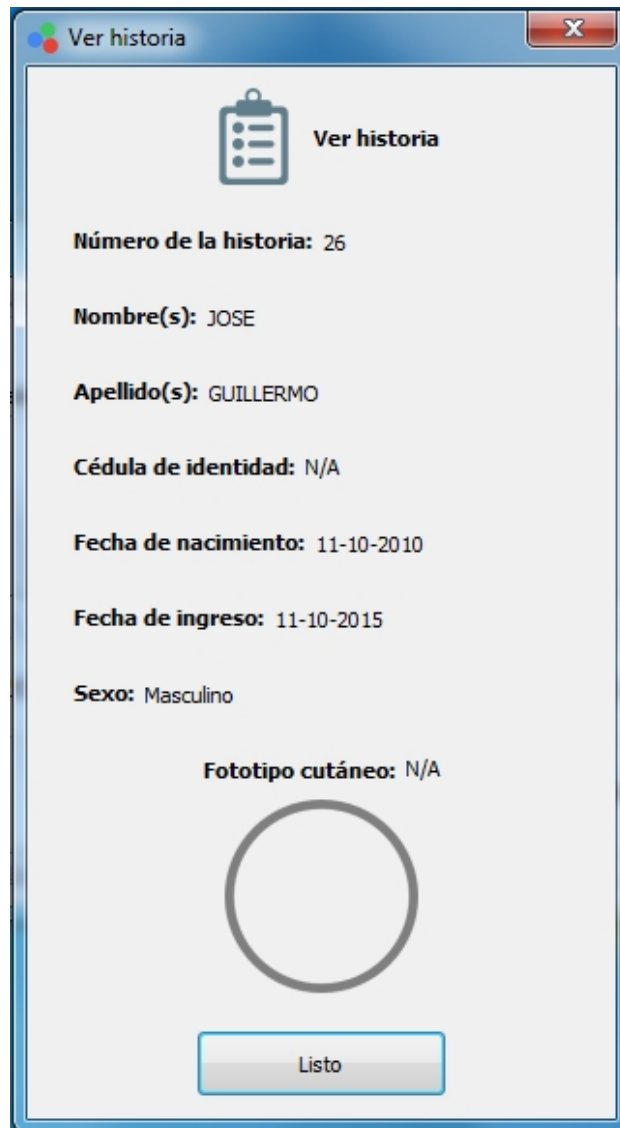



Figura 15: Ver historia

6.4. Modificar historia

Seleccione la opción modificar historia, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú historia. Esta ventana se ilustra en la figura 16.


6.5. Eliminar historia

Seleccione la opción eliminar historia, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú historia. Esta ventana se ilustra en la figura 17.

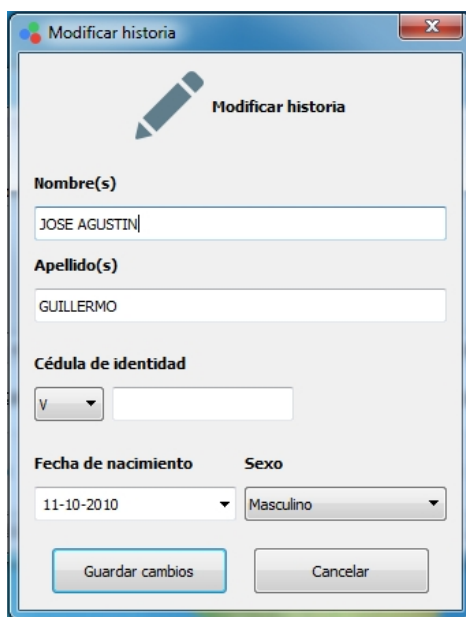

The screenshot shows a window titled "Modificar historia" with a pencil icon. It contains several input fields: "Nombre(s)" with the text "JOSE AGUSTIN", "Apellido(s)" with "GUILLERMO", "Cédula de identidad" with a dropdown showing "V" and an empty text field, "Fecha de nacimiento" with a dropdown showing "11-10-2010", and "Sexo" with a dropdown showing "Masculino". At the bottom are two buttons: "Guardar cambios" and "Cancelar".

Figura 16: Modificar historia

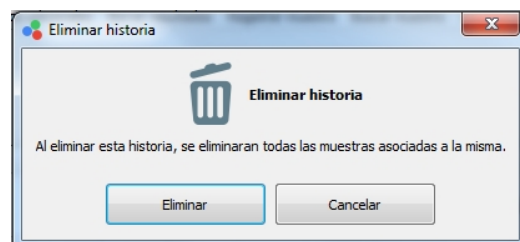

The screenshot shows a window titled "Eliminar historia" with a trash can icon. It contains a message: "Al eliminar esta historia, se eliminarán todas las muestras asociadas a la misma." Below the message are two buttons: "Eliminar" and "Cancelar".

Figura 17: Eliminar historia

7. Gestión de muestras

7.1. Registrar muestra

Seleccione la opción registrar muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). En la ventana de registro aparecerán dos tipos de muestra que se pueden registrar, fototipo y lesión. Solo se puede registrar una muestra si el usuario es dermatólogo, si hay una historia médica cargada y si se realizó una medición nueva. El menú muestra y la ventana de tipos de muestra se ilustran en las figuras 18 y 19.

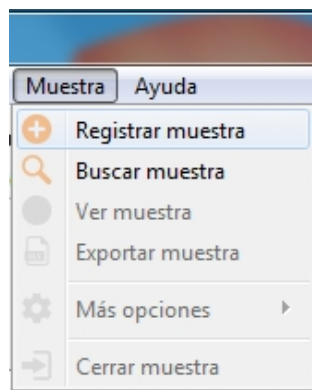


Figura 18: Menú muestra


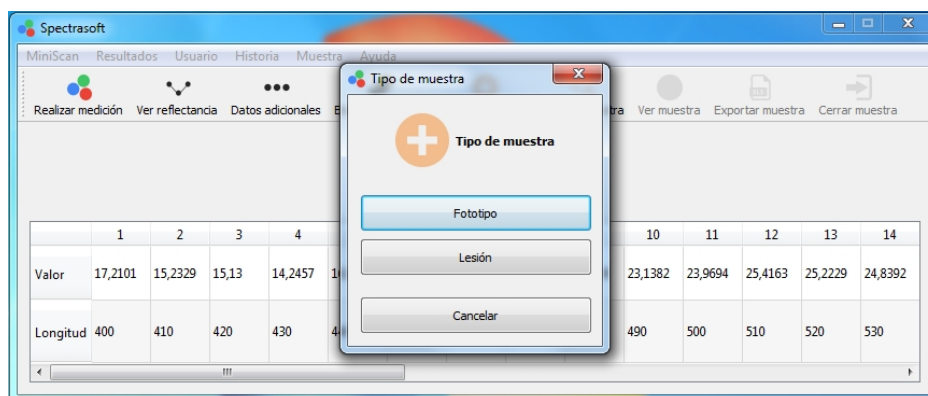


Figura 19: Tipos de muestra

7.1.1. Registrar fototipo

En la ventana para registrar un fototipo, debe especificar el área en donde se le está tomando la muestra al paciente, y se debe seleccionar el fototipo, en la opción clasificar fototipo. Esta ventana se puede apreciar en la figura 20.

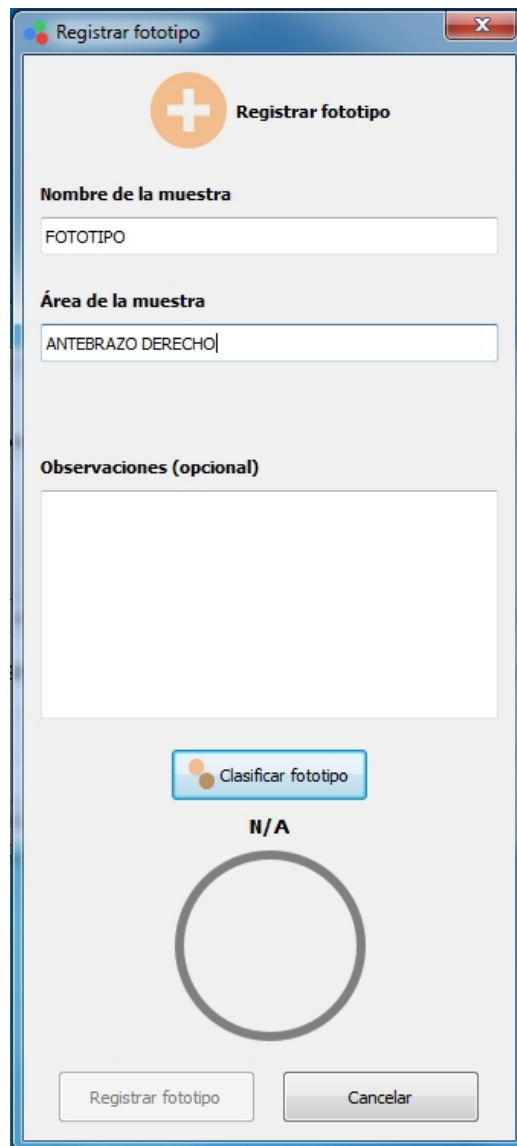

Registrar fototipo

Registrar fototipo

Nombre de la muestra

FOTOTIPO

Área de la muestra

ANTEBRAZO DERECHO

Observaciones (opcional)

Clasificar fototipo

N/A

Registrar fototipo Cancelar

Figura 20: Registrar fototipo

En la ventana de clasificación del fototipo aparecerá el fototipo recomendado para la muestra dada, y será necesario elegir el fototipo que se desea registrar. Esto es ilustrado en la figura 21.


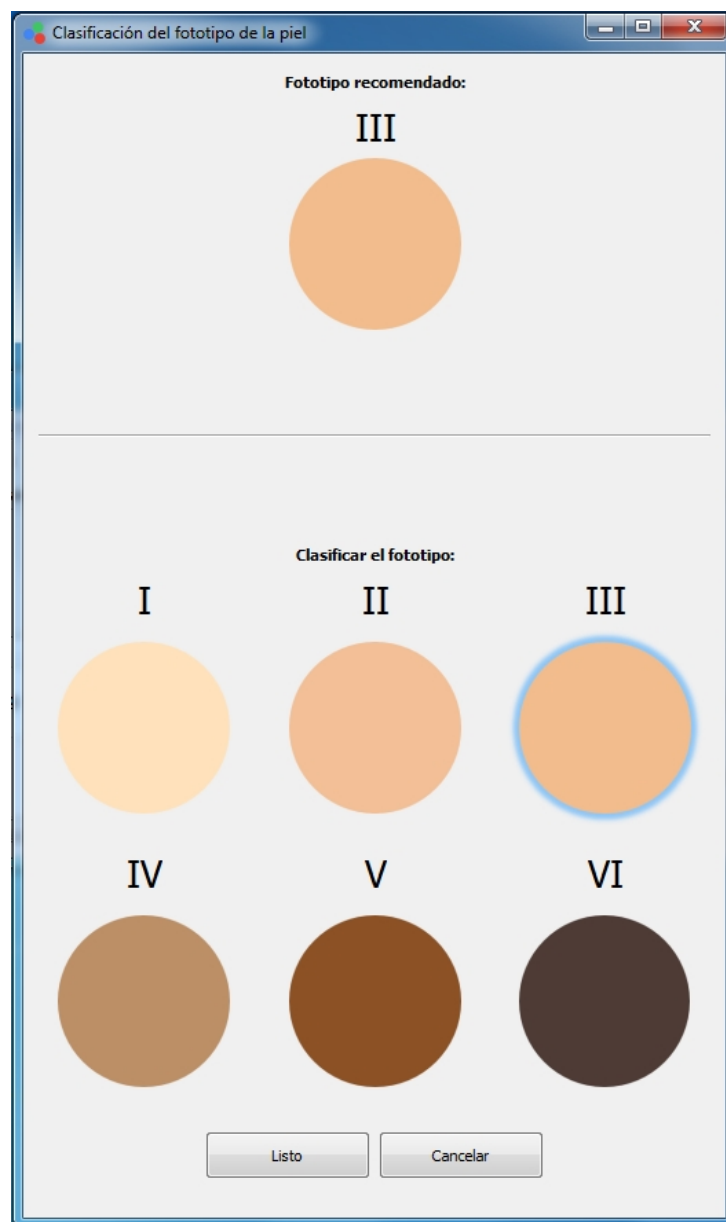


Figura 21: Clasificar fototipo

Luego de haber elegido el fototipo, aparecerá la ventana de registro nuevamente, con el fototipo elegido actualizado; por último, seleccione registrar fototipo. Esto es ilustrado en la figura 22.

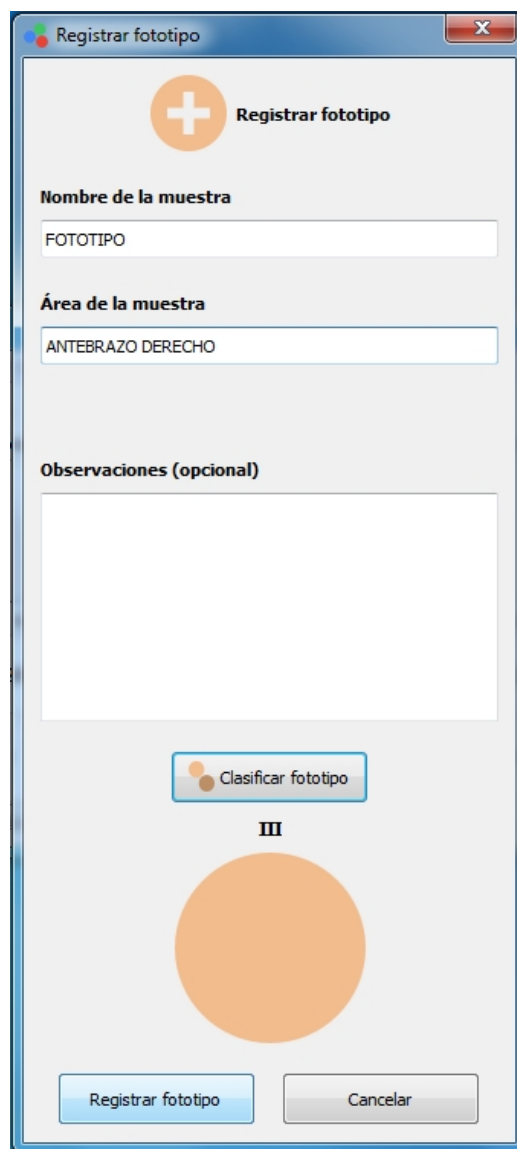

Registrar fototipo

Registrar fototipo

Nombre de la muestra

FOTOTIPO

Área de la muestra

ANTEBRAZO DERECHO

Observaciones (opcional)

Clasificar fototipo


III

Registrar fototipo Cancelar

Figura 22: Registrar fototipo

7.1.2. Registrar lesión

En la ventana de registrar lesión, debe especificar el nombre de la lesión y el área en donde se está tomando la muestra de la misma. Esta ventana se puede apreciar en la figura 23.

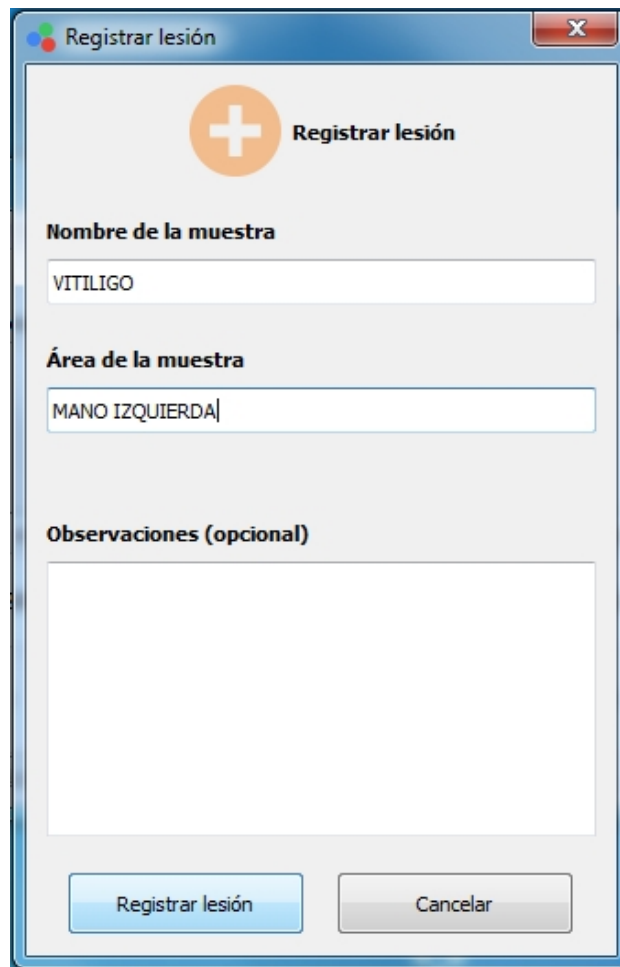

Registrar lesión

Registrar lesión

Nombre de la muestra

VITILIGO

Área de la muestra

MANO IZQUIERDA


Observaciones (opcional)

Registrar lesión Cancelar

Figura 23: Registrar lesión

7.2. Buscar muestra

Seleccione la opción buscar muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). Esta ventana permite filtrar la búsqueda de las muestras pertenecientes a la historia que esté cargada en ese momento, empleando ciertos criterios. Para abrir la muestra, selecciónela en la lista de muestras y por último seleccione la opción abrir muestra. Esta ventana se ilustra en la figura 24.

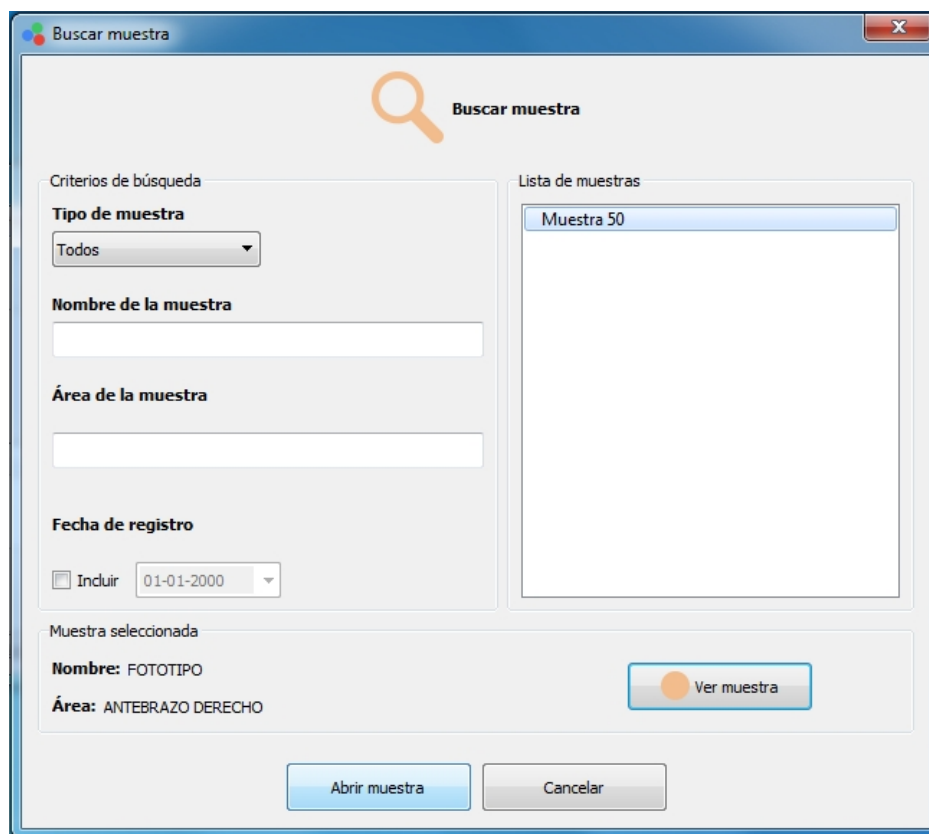

Buscar muestra

Criterios de búsqueda

Tipo de muestra
Todos

Nombre de la muestra
[Empty text box]

Área de la muestra
[Empty text box]

Fecha de registro
☐ Incluir 01-01-2000

Lista de muestras

Muestra 50

Muestra seleccionada

Nombre: FOTOTIPO
Área: ANTEBRAZO DERECHO

Ver muestra

Abrir muestra Cancelar

Figura 24: Buscar muestra

7.3. Ver muestra

Seleccione la opción ver muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). Esta ventana se ilustra en la figura 25.

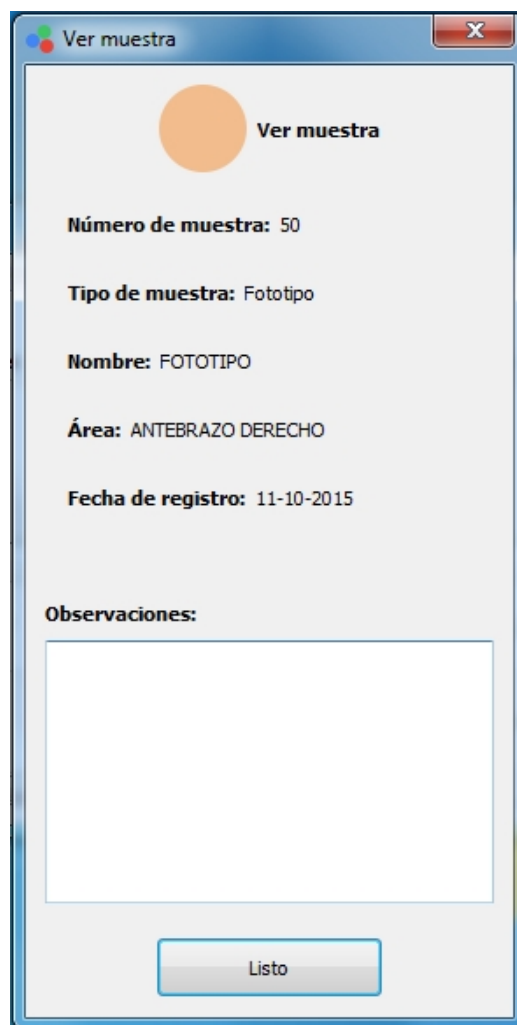


Figura 25: Ver muestra

7.4. Exportar muestra

Seleccione la opción exportar muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). Estas opciones se ilustran en la figura 26.

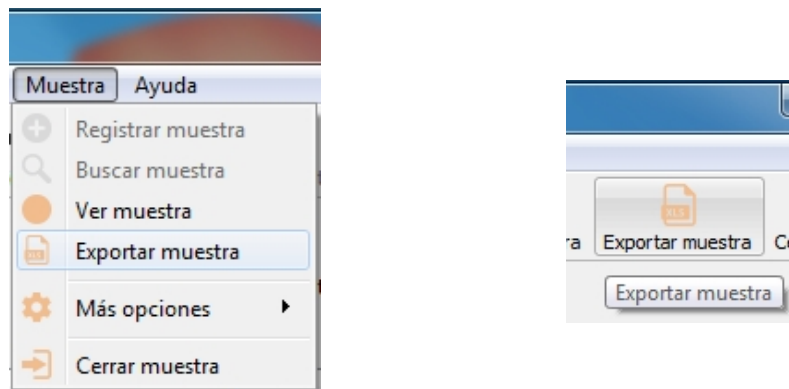


Figura 26: Exportar muestra

La muestra se exporta en el escritorio a un archivo .xlsx, que puede abrirse y modificarse con cualquier programa que maneje hojas de cálculo. Una ilustración de ejemplo del archivo exportado se muestra en la figura 27.

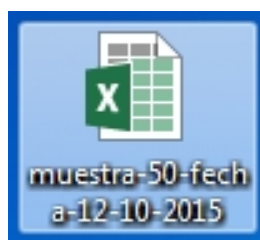



Figura 27: Archivo de muestra exportada

7.5. Modificar muestra

Seleccione la opción modificar muestra, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú muestra. Esta ventana se ilustra en la figura 28.


7.6. Eliminar muestra

Seleccione la opción eliminar muestra, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú muestra. Esta ventana se ilustra en la figura 29.

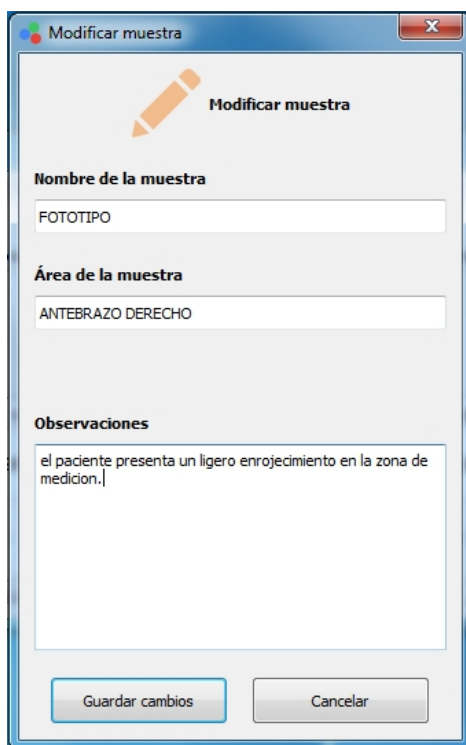

The 'Modificar muestra' dialog box features a title bar with a close button. Inside, there is a pencil icon and the title 'Modificar muestra'. It contains three input fields: 'Nombre de la muestra' with the value 'FOTOTIPO', 'Área de la muestra' with the value 'ANTEBRAZO DERECHO', and 'Observaciones' with the text 'el paciente presenta un ligero enrojecimiento en la zona de medicion.'. At the bottom, there are two buttons: 'Guardar cambios' and 'Cancelar'.

Figura 28: Modificar muestra

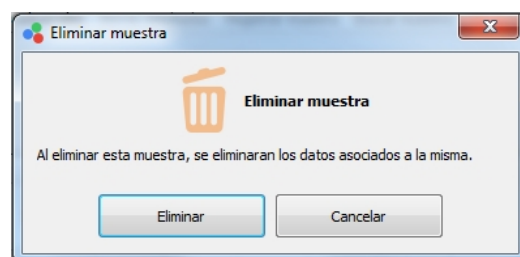


The 'Eliminar muestra' dialog box has a title bar with a close button. It features a trash can icon and the title 'Eliminar muestra'. Below the icon, a message states: 'Al eliminar esta muestra, se eliminaran los datos asociados a la misma.'. At the bottom, there are two buttons: 'Eliminar' and 'Cancelar'.

Figura 29: Eliminar muestra

8. Gestión de usuarios

8.1. Registrar usuario

Seleccione la opción registrar usuario, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú usuario. Esta ventana es ilustrada en la figura 30.

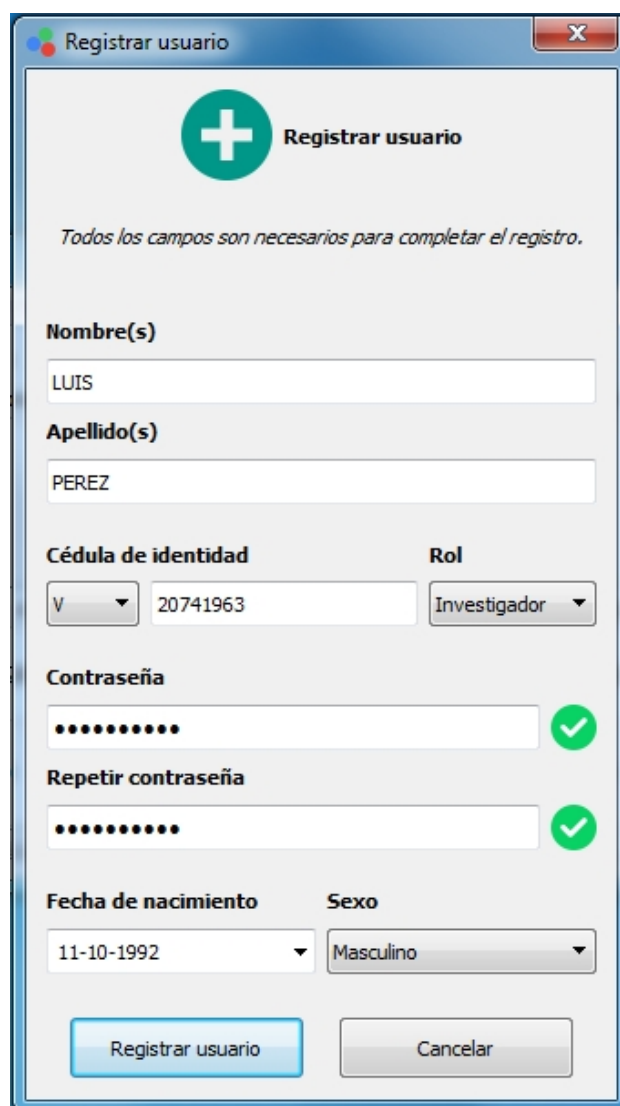

The screenshot shows a window titled "Registrar usuario" with a green plus icon. Below the icon is the text "Registrar usuario" and a note: "Todos los campos son necesarios para completar el registro." The form contains the following fields:

- Nombre(s)**: Text input with "LUIS".
- Apellido(s)**: Text input with "PEREZ".
- Cédula de identidad**: A dropdown menu showing "V" and a text input with "20741963".
- Rol**: Dropdown menu showing "Investigador".
- Contraseña**: Password input field with a green checkmark icon to its right.
- Repetir contraseña**: Password input field with a green checkmark icon to its right.
- Fecha de nacimiento**: Date input field showing "11-10-1992".
- Sexo**: Dropdown menu showing "Masculino".

At the bottom of the form are two buttons: "Registrar usuario" (highlighted in blue) and "Cancelar".

Figura 30: Registrar usuario

8.2. Administrar usuarios

Seleccione la opción administrar usuarios, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú usuario. Administrar usuarios permite cambiar sus roles, cambiar sus contraseñas y eliminarlos. Esta ventana es ilustrada en la figura 31.

Administrar usuarios

Criterios de búsqueda

Nombre(s)

Apellido(s)

Sexo **Rol**

Todos Todos

Cédula de identidad

☐ Incluir V

Fecha de nacimiento

☐ Incluir 11-10-1997

Lista de usuarios

Usuario V13456987
Usuario V19843103
Usuario V20741963

Usuario seleccionado

Nombre(s): LUIS
Apellido(s): PEREZ

Ver usuario

Cambiar rol Cambiar contraseña Eliminar usuario Cancelar

Figura 31: Administrar usuarios

8.2.1. Cambiar rol

Una vez haya seleccionado un usuario de la lista de usuarios, seleccione la opción cambiar rol. Esta ventana es ilustrada en la figura 32.

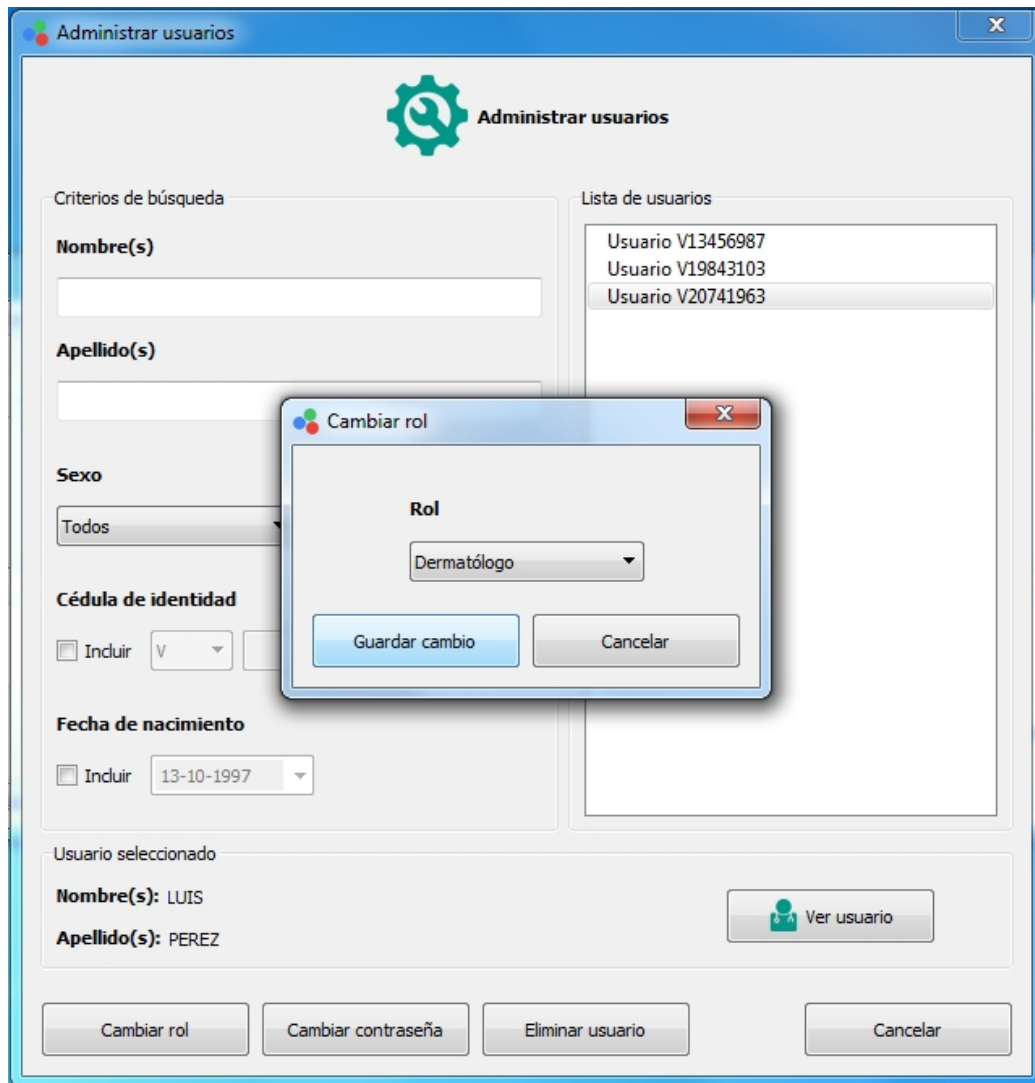


Figura 32: Cambiar rol

8.2.2. Cambiar contraseña

Una vez haya seleccionado un usuario de la lista de usuarios, seleccione la opción cambiar contraseña. Esta opción requiere de la contraseña del administrador que este realizando la operación, y de la nueva contraseña para el usuario. Esto es ilustrado en la figura 33.

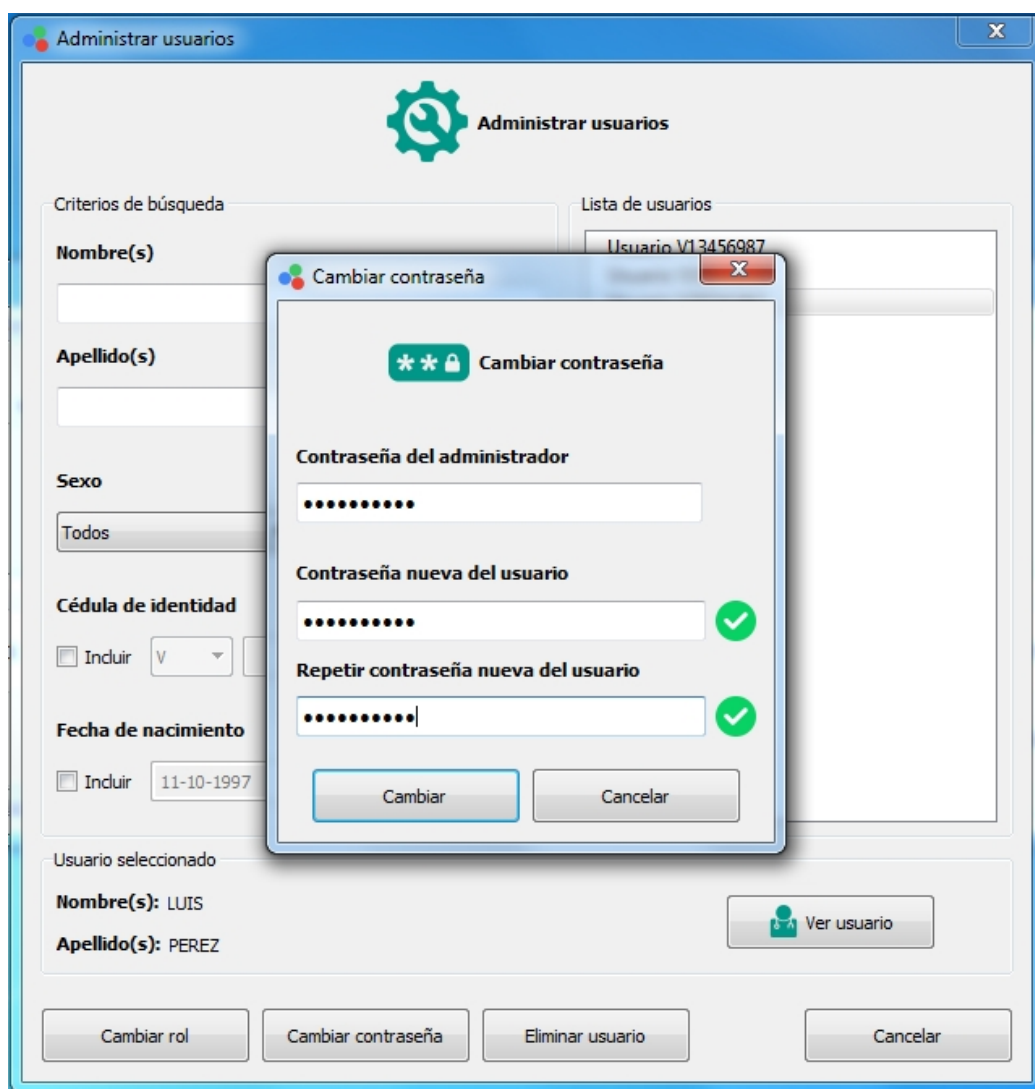


Figura 33: Cambiar contraseña

8.2.3. Eliminar usuario

Una vez haya seleccionado un usuario de la lista de usuarios, seleccione la opción eliminar usuario. Esta opción solo se puede realizar con usuarios que no sean administradores. Esta opción es ilustrada en la figura 34.

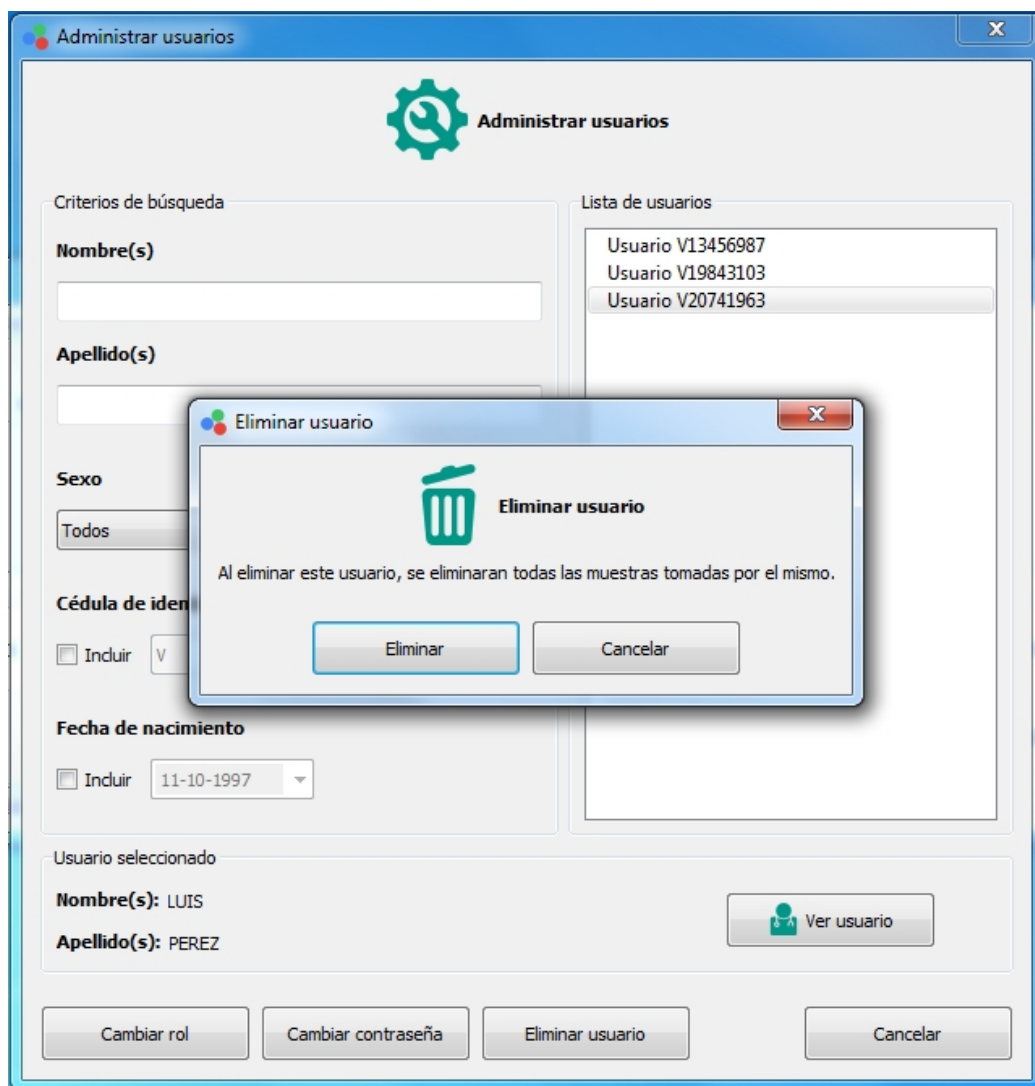


Figura 34: Eliminar usuario